

FLASTER PROTIV GLJIVICA NA NOKTIMA FUNGEX

HR FLASTER PROTIV GLJIVICA NA NOKTIMA FUNGEX

- Učinkovito tretiranje gljivičnih infekcija nokta
- Brzo vidljivi rezultati
- Jednostavna i precizna primjena
- Nanesite samo jedanput dnevno
- 8 sati se nastavlja djelovanje na noktu

Sadržaj ovog lekta s uputama za uporabu

1. Što je flaster protiv gljivica na noktima FungeX?
2. Kako koristiti flaster protiv gljivica na noktima FungeX
3. Moguće nuspojave
4. Trudnoća i dojenje
5. Rok valjanosti i čuvanje
6. Upozorenja
7. Sadržava
8. Sastojci

1. ŠTO JE FLASTER PROTIV GLJIVICA NA NOKTIMA FUNGEX?


Flaster protiv gljivica na noktima FungeX je revolucionarni proizvod koji pruža učinkovito i intenzivno tretiranje gljivica na noktima te deformiranih noktiju na nogama promijenjene boje. Flaster protiv gljivica na noktima FungeX pruža prirodnu njegu kontinuiranim otpuštanjem aktivnih sastojaka tijekom maksimalno 6 – 8 sati. Flaster protiv gljivica FungeX pruža kontinuirani hidratacijski učinak, potiče bolji izgled deformiranih noktiju promijenjene boje, nježno zaglađuje vanjske slojeve ploče nokta, sprječava razvoj gljivične infekcije promjenom mikrokruženja nokta. Posebno dizajniran oblik flastera pruža praktičnu, jednostavnu i učinkovitu primjenu.

Flaster protiv gljivica na noktima FungeX tretira i sprječava razvoj gljivica na noktima, poboljšava izgled nokta i smanjuje nejednakost boje. Klinička ispitivanja s formulom FungeX pokazala su vidljive rezultate unutar nekoliko tjedana primjene.

2. KAKO UPOTREBLJAVATI FLASTER PROTIV GLJIVICA FUNGEX

Nokte očistite i uklonite kozmetički lak za nokte, prašinu ili masnoću prije svake primjene. Nije potrebno rašpanje noktiju prije primjene.

1. Nakon uklanjanja plastične prozirne naljepnice (1) uklonite tanku naljepnicu koja se nalazi na umetku u obliku nokta (2)
2. Namjesite umetak u obliku nokta na sredinu nokta kako bi liječenje bilo što uspješnije. Uklonite bijelu traku na stražnjoj strani flastera (3)
3. Čvrsto omotajte bočne strane nokta (na ruci ili nogama) krilcima flastera, a zatim omotajte vrh nožnog prsta ili prsta ruke preostalim gornjim dijelom.
4. Ostavite FungeX flaster protiv gljivica na noktima 8 sati kako biste osigurali učinkovito i intenzivno tretiranje, po mogućnosti tijekom noći. Nanesite flaster jednom dnevno na zaražene nokte.

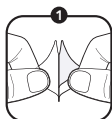

Najbolji rezultati vidljivi su svakodnevnim tretmanom sve dok je nokat zaražen. Tretiranje ovisi o težini stanja i treba ga nastaviti dok ne izraste zdrav nokat. U većini slučajeva novi će nokat izrasti unutar 3 – 6 mjeseci.

3. MOGUĆE NUSPOJAVE

Nema poznatih nuspojava kada se FungeX flaster protiv gljivica na noktima upotrebljava prema uputama za uporabu.

4. TRUDNOĆA I DOJENJE

Proizvod ima lokalno djelovanje, i stoga se može upotrebljavati tijekom trudnoće i dojenja. Za primjenu kod djece prije uporabe posavjetujte se s liječnikom.

5. ROK VALJANOSTI I ČUVANJE

- Čuvajte na hladnom, suhom mjestu u spremniku koji ne propušta zrak i na sobnoj temperaturi.
- Čuvajte izvan dohvata djece
- Dobro zatvorite ambalažu radi pohranjivanja preostalog flastera u folijsku vrećicu kako biste spriječili njegovo isušivanje.



6. UPOZORENJA

- Samo za vanjsku primjenu.
- Izbjegavajte uporabu na nadraženoj ili suncem opekloj koži.
- Izbjegavajte izravan kontakt s očima, ustima, sluznicom, ranama ili upaljenom kožom.
- Prestanite upotrebljavati proizvod ako koža pocrveni, otekne ili počinje svrbjeti tijekom ili poslije uporabe.
- Nemojte upotrebljavati flaster ako ste imali neželjenu reakciju na bilo koju vrstu flastera.
- Nemojte upotrebljavati ako ste alergični na neki od sastojaka.
- Ako nuspojave postanu zabrinjavajuće ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovom letku, obavijestite svojeg liječnika ili ljekarnika.
- Flaster protiv gljivica na noktima FungeX je samo za odrasle.

7. SADRŽAVA: 14 Flastera protiv gljivica na noktima FungeX

8. SASTOJCI: Urea, 1,3-butilenglikol, fumarna kiselina.

Sve upite o proizvodu uputite distributeru.

Za više informacija o uporabi flastera protiv gljivica na noktima FungeX posjetite www.fungex.hr

FungeX je registrirani zaštitni znak TheOTCLab.

Posljednja revizija teksta: prosinac 2021.

SL OBLIŽ PROTI GLIVICAM NA NOHTIH FUNGEX

- Učinkovito odpravljanje glivičnih okužb nohtov
- Hitri in vidni rezultati
- Enostaven in natančen nanos
- Nanesite samo enkrat na dan
- Nadaljuje z delovanjem na nohtih 8 ur

Vsebina tega navodila za uporabo

1. Kaj je obliž proti glivicam na nohtih FungeX?
2. Kako uporabljati obliž proti glivicam na nohtih FungeX?
3. Možni neželeni učinki
4. Nosečnost in dojenje
5. Rok uporabnosti in shranjevanje
6. Opozorila
7. Vsebuje
8. Sestavine

1. KAJ JE OBLIŽ PROTI GLIVICAM NA NOHTIH FUNGEX


Obliž proti glivicam na nohtih FungeX je revolucionaren medicinski pripomoček, ki zagotavlja učinkovito in intenzivno odpravljanje glivic na nohtih in razbarvanih, deformiranih nohtov (na nogah). Ta obliž proti glivicam na nohtih FungeX zagotavlja naravno nego z neprekinjenim sproščanjem aktivnih sestavin največ 6–8 ur. Obliž proti glivicam na nohtih FungeX zagotavlja neprekinjen vlažilni učinek, poskrbi za izboljšan videz razbarvanih in deformiranih nohtov, nežno zglati zunanje plasti nohtov ter preprečuje rast glivične okužbe s spreminjanjem mikrookolja nohta. Posebna oblikovana oblika obliža zagotavlja priročen, preprost in učinkovit točkovni nanos.

Obliž proti glivicam na nohtih FungeX odpravlja glivice na nohtih, izboljša videz nohtov in zmanjša razbarvanje. Klinične raziskave s formulo FungeX so pokazale vidne rezultate v nekaj tednih.

2. KAKO UPORABLJATI OBLIŽ PROTI GLIVICAM NA NOHTIH FUNGEX?

Najprej očistite noht in pred vsakim nanosom odstranite lak, prah ali olje. Pred uporabo ni potrebno piljenje nohta.

1. Ko odstranite plastično prozorno nalepko (1), odstranite še tanko nalepko, ki se nahaja na obližu v obliki nohta (2).
2. Postavite obliž v obliki nohta na sredino nohta, s čimer zagotovite točkovni nanos. Odstranite beli trak na dnu obliža (3).
3. S krljici obliža tesno ovijte stranice nohta (na nogi), nato pa s preostalim zgornjim delom ovijte prst na nogi ali konico prsta na roki.
4. Pustite obliž proti glivicam na nohtih FungeX na nohtu (na nogi) 8 ur, da zagotovite učinkovito in intenzivno delovanje – najbolje ponoči. Obliž nanesite enkrat dnevno na prizadete nohte.

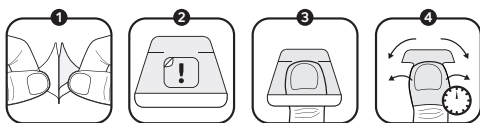

Najboljši rezultati so vidni z vsakodnevno uporabo, dokler je noht prizadet. Trajanje uporabe je odvisno od resnosti stanja in ga je treba nadaljevati, dokler ne izraste zdrav noht. V večini primerov bo nov noht zrasel v 3–6 mesecih.

3. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Pri uporabi obliža proti glivicam na nohtih FungeX v skladu z navodili za uporabo niso znani neželeni učinki.

4. NOSEČNOST IN DOJENJE

Izdelek deluje le lokalno, zato se lahko uporablja med nosečnostjo in dojenjem. Za uporabo pri otrocih se pred zdravljenjem posvetujte z zdravnikom.

5. ROK UPORABNOSTI IN SHRANJEVANJE

- Shranjujte v hladnem, suhem prostoru v nepredušnem vsebniku pri sobni temperaturi.
- Embalažo shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Po uporabi dobro zaprite vrečko iz folije za shranjevanje preostanka obliža, da preprečite izsušitev.

⚠ 6. OPOZORILA

- Samo za zunanjo uporabo.
- Izogibajte se uporabi na razdraženi ali opečeni koži ter neposrednemu stiku z očmi, usti, sluznico, ranami ali vneto kožo.
- Prenehajte z uporabo, če vaša koža med uporabo ali po uporabi postane rdečkasta, otekla ali srbeča.
- Tega obliža ne uporabljajte, če ste doživeli neželeno reakcijo na katero koli vrsto obliža.
- Ne uporabljajte, če ste alergični na katero koli sestavino.
- Če kateri koli neželeni učinek postane resen ali če opazite kateri koli neželeni učinek, ki ni omenjen v teh navodilih, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.
- Obliž proti glivicam na nohtih FungeX je namenjen samo za odrasle.

7. VSEBUJE: 14 obližev FungeX

8. SESTAVINE: Sečnina, 1,3-butilen glikol, fumarna kislina.

Vsa vprašanja o izdelku pošljite distributerju.

Za več informacij o obližu proti glivicam na nohtih FungeX obiščite spletno stran www.fungex.si

FungeX je registrirana blagovna znamka družbe TheOTCLab.

Zadnja revizija besedila: december 2021

Distributer

Pontus Pharma d.o.o.
Kralja Zvonimira 62
10000 Zagreb, Hrvatska/Hrvaška

EC REP Ovlašteni predstavnik / Pooblaščen zastopnik:

Wooshin Lapache D.O.O.
Industrijska Cesta 1J
1290 Grosuplje, Slovenija



Proizvodnja / Proizvajalec
Wooshinlabottach CO., LTD
Songdo BRC Smart Vally B-109,
914,915,1012,1013,1014,1015,
1019,1020
30, Songdomirae-ro, Yeonsu-gu,
Incheon City, Republika Koreja

